

**Les premières
unités dentaires
intelligentes.**



Model Pro 500.



Model Pro 700.
(avec 6 instruments)



Model Pro 600.



Model Pro 800.
(avec 6 instruments)


Intelligent dans la communication.

Impressionnez vos patients grâce à vos nouvelles compétences numériques. Présentez leur plan de traitement ou informez-les sur l'hygiène et la prévention à l'aide d'outils de pointe. Applications, images, diaporamas ou vidéos vous aideront à démontrer votre compétence et votre assurance.



Éducation du patient.

Vidéos éducatives, logiciels ou présentations sont toujours à portée de main. Enseignez à vos patients les soins bucco-dentaires de manière simple et interactive.

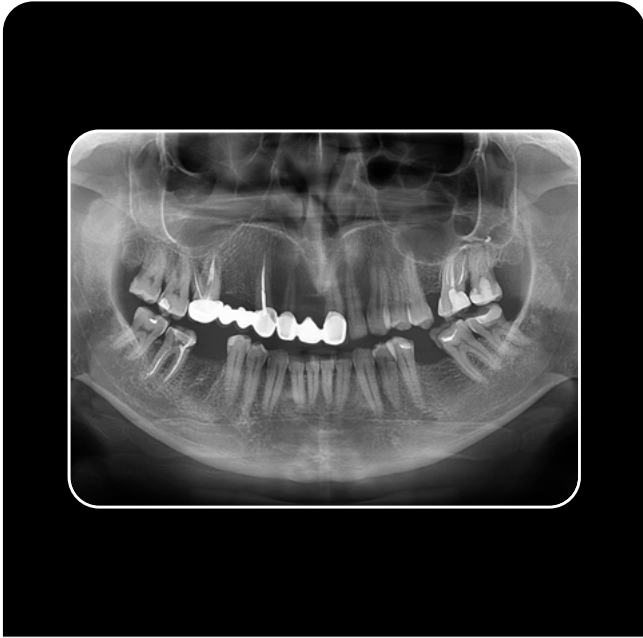

Intégration des logiciels d'imagerie.


Affichez vos clichés sur l'écran de la tablette et consultez-les avec vos patients. En quelques gestes seulement.



Gestion des patients.

Plus besoin de quitter l'unité de soins pour retourner à votre bureau afin de consulter l'historique de traitement. Utilisez votre logiciel de gestion de patientèle directement sur la tablette.

Flux de travail intelligent de l'unité dentaire.

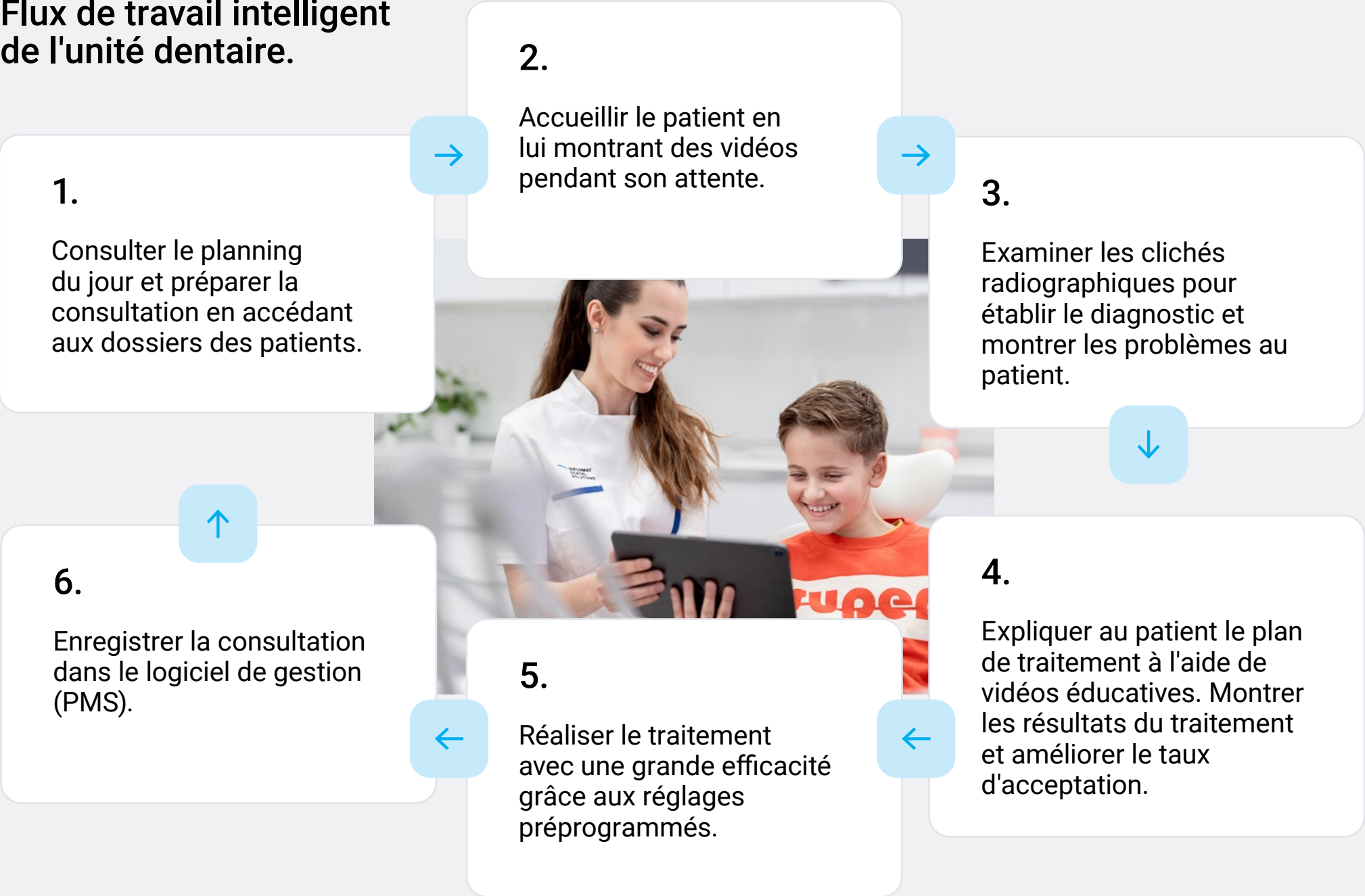

Design intelligent.

La majorité du personnel dentaire souffre de maux de dos et du syndrome du canal carpien. Notre philosophie de conception repose sur la conviction que votre travail quotidien ne doit jamais mettre votre corps à rude épreuve. Nous appliquons les mêmes principes aux patients. Menez une vie professionnelle saine et équilibrée grâce à nos solutions ergonomiques intelligentes.


Le Model Pro prend soin de vous.

Ce n'est pas seulement vos patients, mais vous aussi, qui méritez ce qu'il y a de mieux. Les troubles musculosquelettiques semblent être la principale cause de départ prématuré à la retraite des praticiens dentaires.

Une bonne ergonomie est essentielle à votre santé à long terme. Le Model Pro répond à toutes les conditions d'un travail ergonomique, de la position palatine aux positions opératoires.



Quelques points forts ergonomiques:

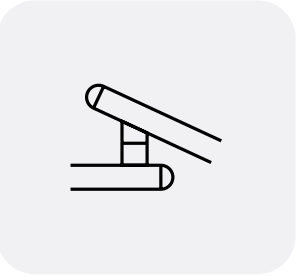

Les bras de l'unité dentaire sont ergonomiquement adaptés à votre travail quotidien.



Un dossier large pour une plus grande mobilité du patient et une meilleure ergonomie pour le dentiste.



Épaisseur de dossier minimale permettant au dentiste de se rapprocher de la tête du patient.




La console porte-instruments et le bras l'assistant peuvent se rapprocher considérablement pour un traitement à deux mains en position 12 heures.



Console de l'assistant peut libérer de l'espace pour un traitement à quatre mains.

Vers le haut ou vers le bas? À vous de choisir!

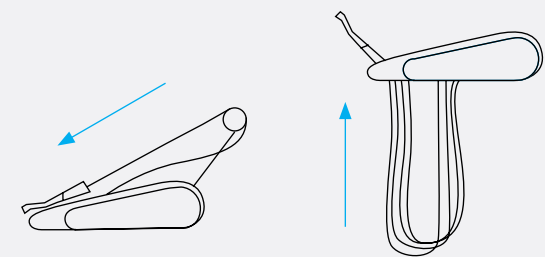

Style continental
Système de distribution par fouets.

Style traditionnel
Système de distribution par cordons pendants.

Style continental



Style traditionnel

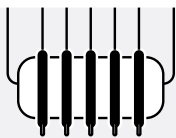


Table à 5 instruments par défaut sur:

Model Pro 500 & 600.


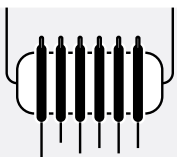


Table à 6 instruments par défaut sur:

Model Pro 700 & 800.

Préservez votre santé.

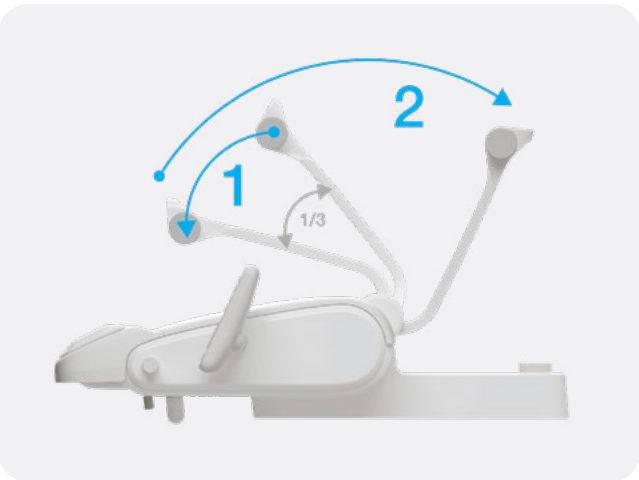

Pas de retour en arrière.

Une toute nouvelle construction des flexibles et un rééquilibrage des instruments ne font peser aucune contrainte sur vos bras et vos poignets: aucun effet de rappel. Le flexible est tiré vers la butée pour se déverrouiller, puis revient à sa position de repos.



Mouvement fluide et facile.

Grâce au frein pneumatique des bras pantographiques et aux roulements des éléments rotatifs.





Maintenez le flexible en main.

La perche du fouet peut être automatiquement verrouillée en mode de travail puis par un simple tir sur le cordon la perche est déverrouillée et revient à sa place de repos.

Le coup de foudre dès la première assise.

La conception du Model Pro suit des principes ergonomiques pour garantir une expérience confortable au patient comme au praticien.

- a) Le dossier est suffisamment large pour permettre un mouvement latéral du haut du corps du patient.
- b) Pour les praticiens les plus exigeants, une tête 3D est indispensable pour permettre une flexion latérale de la tête du patient.

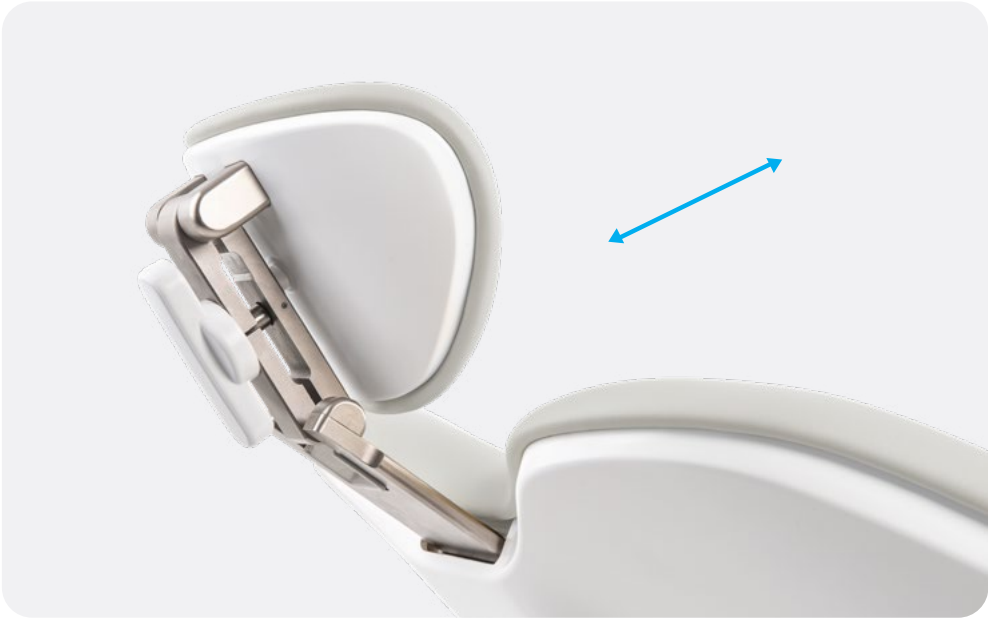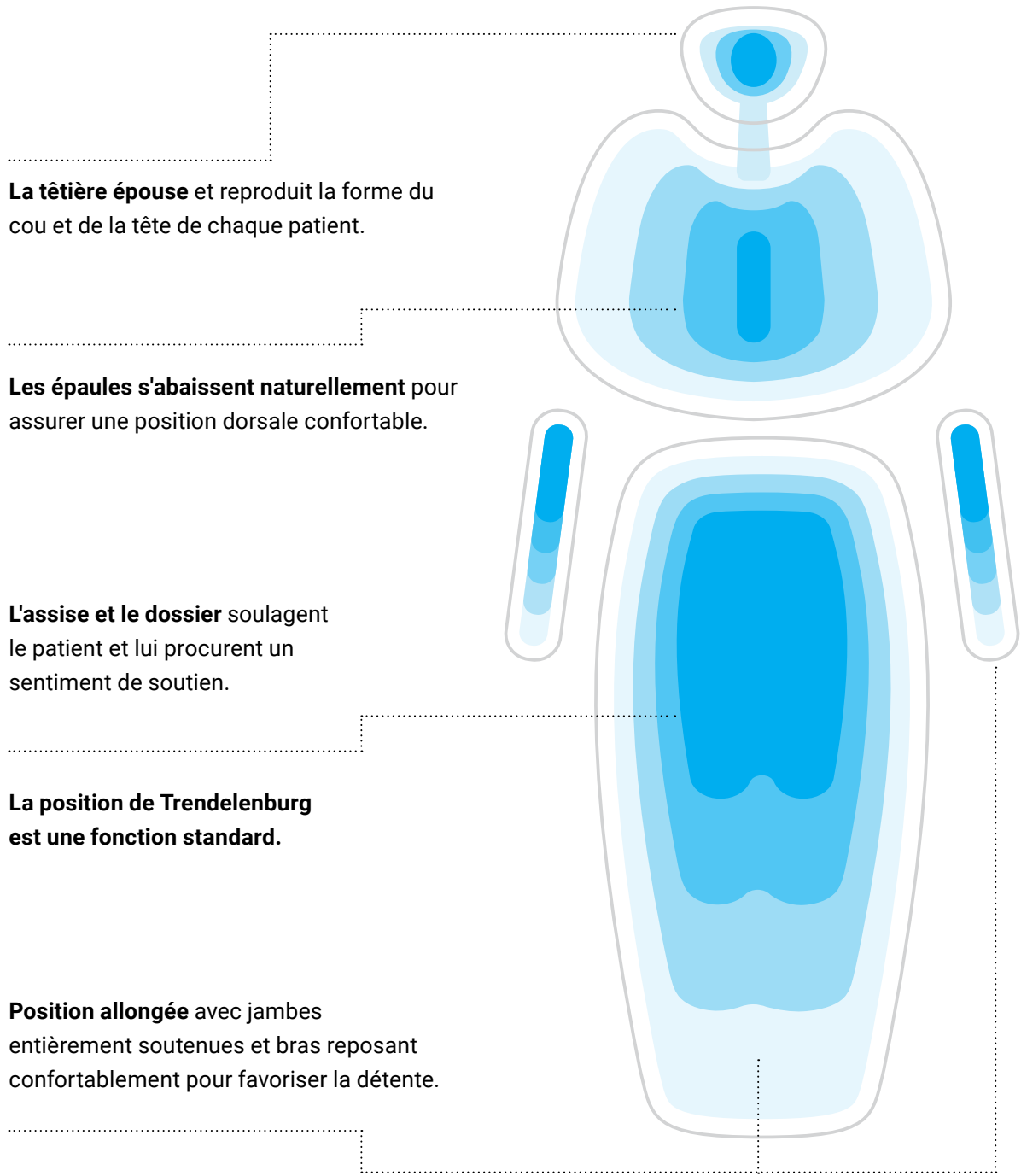

Tête mécanique 2D

L'inclinaison de la tête mécanique se règle en libérant le levier situé à l'arrière de la tête. Une fois la position souhaitée atteinte, le dossier doit être verrouillé à l'aide du levier.

Équipement standard



Tête pneumatique 3D

L'inclinaison du dossier pneumatique se règle en appuyant sur le bouton de frein pneumatique. Une fois la position souhaitée atteinte, relâchez le bouton.

Le réglage en hauteur s'effectue mécaniquement, en tirant ou en poussant dans le sens du réglage.

Équipement optionnel

Fauteuil à chaise pour Model Pro 600/800.



Conçu en pensant à l'accessibilité.

Accès facilité pour les patients à mobilité réduite. Le design innovant de l'assise offre une expérience fluide et sans effort lors de l'installation et du lever, réduisant les contraintes physiques.



Associé à la version fauteuil suspendu du Model Pro, qui abaisse l'assise plus près du sol (350 mm), cette fonctionnalité renforce considérablement l'accessibilité — en particulier pour les patients à mobilité réduite ou nécessitant un soutien supplémentaire.

Associé à la solution tablette, le Diplomat Model Pro offre l'un des meilleurs fauteuils dentaires pour la communication avec le patient, renforçant à la fois son implication et son expérience globale.

Une solution idéale pour les établissements de santé publique et les cliniques accueillant des patients en situation de handicap, garantissant à chaque patient de se sentir à l'aise dans le fauteuil.



Repose-pieds à extension automatique.



Favorise une communication plus naturelle avec le patient tout en le maintenant confortablement assis pour les échanges relatifs au traitement.

Pédale.

Améliorez votre posture et votre ergonomie de travail grâce à des commandes au pied compatibles.

Vous pouvez choisir entre des options filaires et sans fil. La commande au pied sans fil offre une autonomie moyenne de 2 à 3 mois; la recharge s'effectue en 24 heures, sans jamais interrompre l'utilisation de votre unité dentaire.



NOK

Configurable via l'application Diplomat Connect.



SWING

Pédale multifonction à commande horizontale permettant de piloter les instruments, le fauteuil et le groupe hydrique. Ergonomie améliorée et contrôle facile du jet des instruments grâce au levier.

Un bras supplémentaire, toujours utile.

Le console assistant est disponible avec un bras basique ou pantographique. Optez pour le bras pantographique afin d'offrir encore plus d'espace de travail à votre équipe.



Et pourtant, il bouge!

Le crachoir du Model Pro existe en deux versions. Le bol rotatif peut être mécanique ou électronique.



Quel éclairage choisirez-vous?

Vous pouvez choisir parmi les lampes dentaires XENOS, MAIA ou SIRIUS. La lampe XENOS atteint jusqu'à 26 000 lux. La MAIA offre jusqu'à 45 000 ±5% lux avec un IRC > 95. La SIRIUS offre des performances encore supérieures selon la configuration ci-dessous. Toutes les lampes disposent de fonctions mains libres grâce au capteur sans contact.



MAIA



XENOS

Disponible en options:

Sirius Essential	Sirius Plus	Sirius Power	Sirius Ultra
Luminosité: 35 000 lx	Luminosité: 35 000 lx	Luminosité: 50 000 lx	Luminosité: 50 000 lx
LED: 4 blanches	LED: 4 blanches + 4 jaunes	LED: 4 blanches + 4 jaunes	LED: 4 blanches + 4 jaunes
Température: 5500 K ±10%	Température: 5500 K ±10%	Température: 5500 K ±10%	Température: Réglable 5500/4800/4400/4000 K ±10%
Mode composite: Aucun	Mode composite: Oui ("jaune", 430–480 nm)	Mode composite: Oui ("jaune", 430–480 nm)	Mode composite: Oui ("jaune", 430–480 nm)
Zone d'éclairage: Nette	Zone d'éclairage: Nette	Zone d'éclairage: Nette	Zone d'éclairage: Nette
Réglage d'intensité: Progressif, plage complète	Réglage d'intensité: Progressif, plage complète	Réglage d'intensité: Progressif, plage complète	Réglage d'intensité: Progressif (5500 K) + 4 paliers (4000–4800 K)



SIRIUS

Le Model Pro à votre image.

Personnalisez la sélection des couleurs et le revêtement du fauteuil selon vos goûts. Avec des dizaines d'options au choix, c'est le moment de laisser votre personnalité s'exprimer. Découvrez les choix les plus populaires ci-dessous. Retrouvez toutes les options disponibles dans notre catalogue de revêtements.



Revêtement Standard.

Sans coutures, facile à nettoyer, résistant à l'abrasion, résistant aux désinfectants et lavable. Ajustement facile sans vis.



Revêtement Confort.

Plus confortable, avec coutures pour un design élégant, résistant à l'abrasion, résistant aux désinfectants et lavable. Ajustement facile sans vis.



Revêtement Premium.

Confort supérieur, mousse active, avec coutures pour un design élégant, résistant à l'abrasion, résistant aux désinfectants et lavable. Ajustement facile sans vis.




Collection Standard.
8 coloris.



Collection Spéciale.
20 coloris.



Collection Antimicrobienne.
15 coloris.

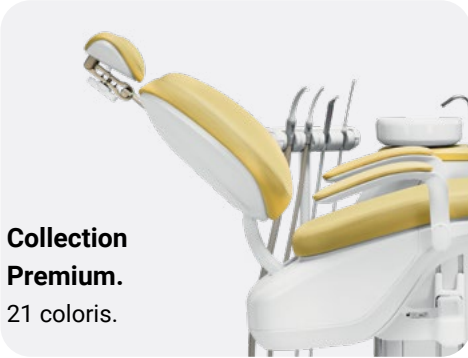

Collection Premium.
21 coloris.



Retrouvez tous les détails dans notre catalogue de revêtements.

Intelligent dans les opérations quotidiennes.

L'avenir, c'est maintenant. Digitalisez vos opérations quotidiennes avec le Model Pro et ses fonctionnalités intelligentes qui amélioreront non seulement votre flux de travail au quotidien, mais qui surprendront également vos patients.



Application Diplomat Connect.


Imaginez un membre d'équipe supplémentaire qui se souvient de chaque détail pour fluidifier votre journée de travail — sans figurer sur la fiche de paie. C'est exactement ce que fait l'application Diplomat Connect. Intégrée au Model Pro, elle vous permet de contrôler et d'automatiser l'unité et les instruments intelligents en quelques gestes, via une tablette connectée en Bluetooth.



| Nouvelle option.

Model Pro avec écran tactile intégré.

Conçu pour les dentistes qui privilégient la simplicité et la fiabilité. Aucun appareil supplémentaire, support de fixation ni connexion externe — juste une solution intuitive, toujours prête, sans appairage ni charge nécessaire. L'interface lisse et scellée est facile à utiliser, même pour les nouveaux utilisateurs, et se nettoie rapidement pour une hygiène parfaite. Idéal pour les hôpitaux et les grandes cliniques où plusieurs utilisateurs partagent le fauteuil et où une tablette séparée pourrait être exposée au vol ou à une mauvaise utilisation.

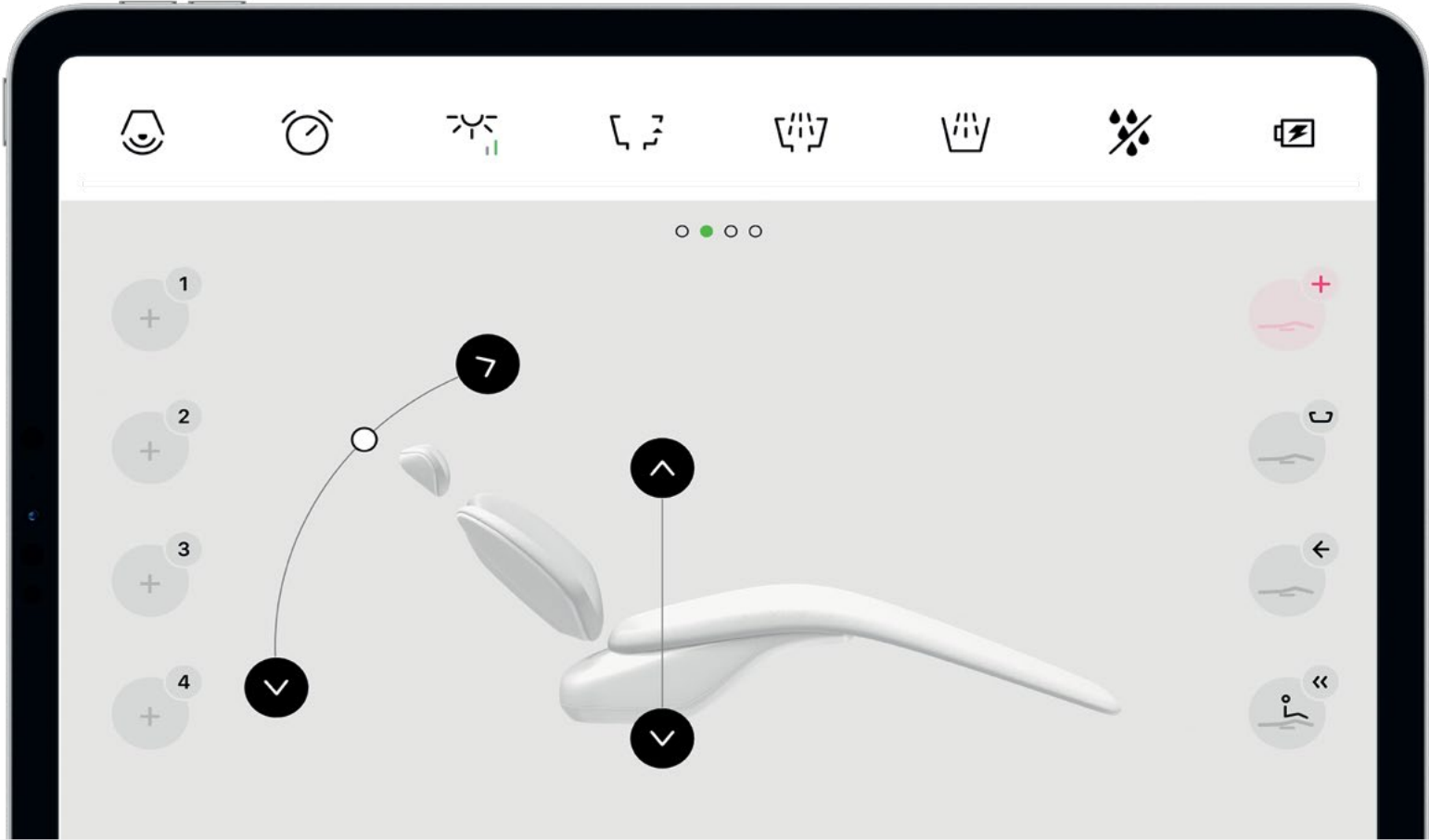

Piloter l'unité.


Pilotez l'unité de manière simple, intuitive et moderne. Enregistrez votre flux de travail préféré pour des performances encore meilleures.

Contrôler les instruments de l'unité dentaire.


L'interface utilisateur vous donne un accès rapide aux réglages de tous les instruments.

Une solution flexible et ouverte.

Utilisez la tablette comme source unique pour accéder aux données du patient, aux clichés radiographiques, aux photos, et pour augmenter le taux d'acceptation des traitements.

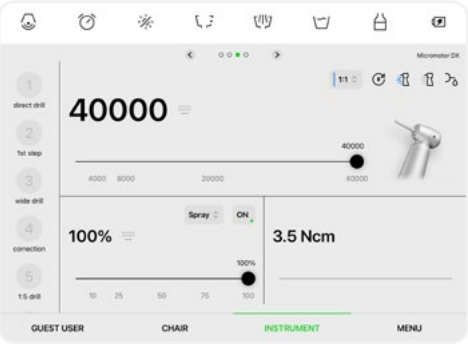


Micromoteur.

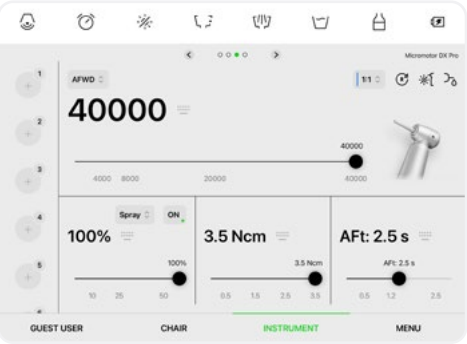

Fonction ENDO intégrée.



Fonction implant intégrée.

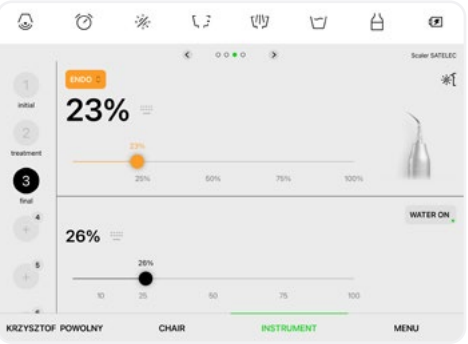

Réglages du détartreur.


Choisissez votre détartreur.

La sélection des détarteurs compatibles avec le Model Pro comprend:

Détartreur	PERIO	ENDO	SCALING & GENERAL	BOOST
Satelec SP Xinetic	●	●	●	
Satelec NEWTRON	●	●	●	●
Satelec NEWTRON LED	●	●	●	●
NSK VA170	●	●	●	
NSK VA170 LED	●	●	●	
WOODPECKER		●	●	

EMS

Les détarteurs EMS n'ont pas de fonctions spécifiques. Leur plage d'intensité s'étend de 0 à 10, couvrant tous les modes.

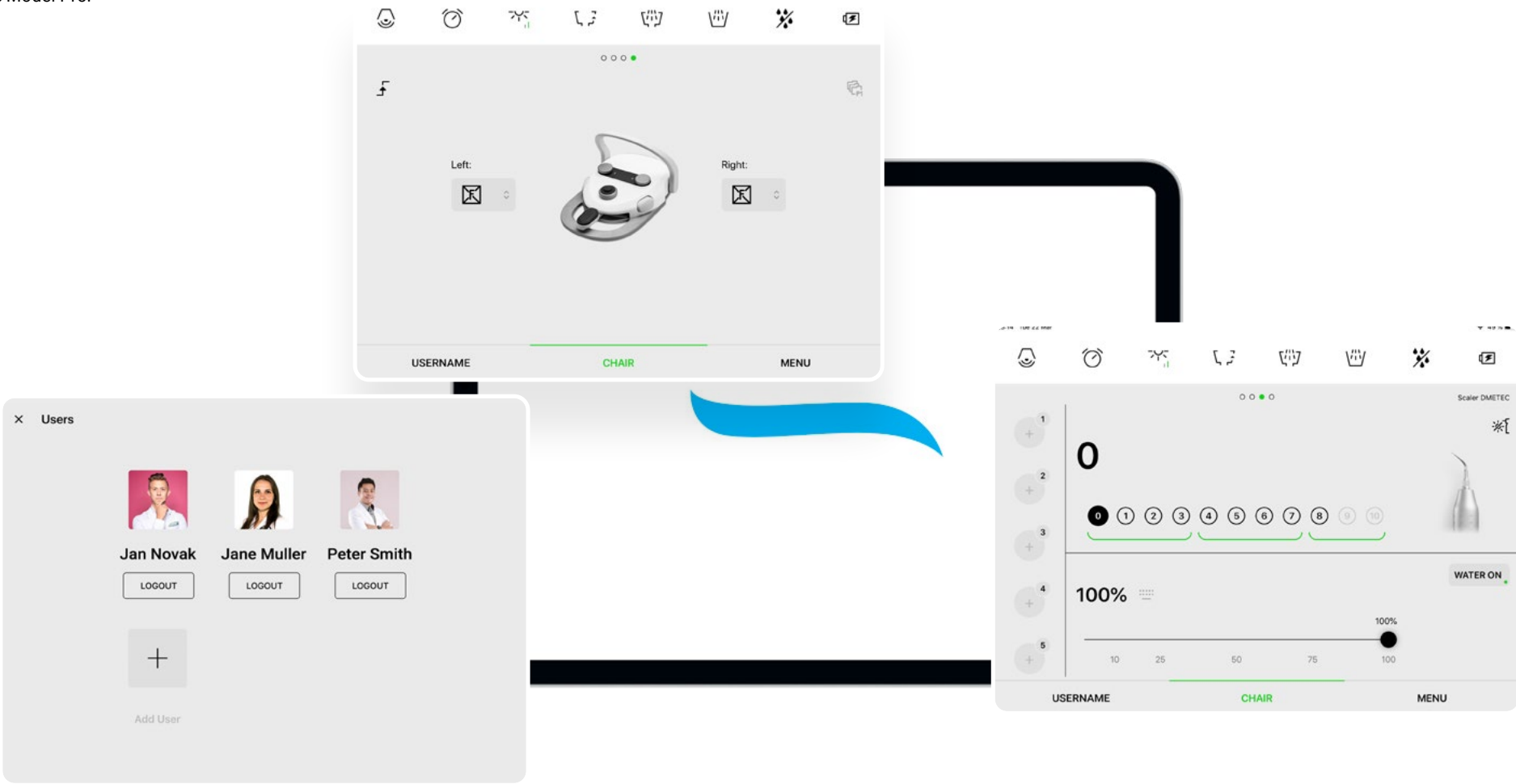

Choisissez votre joueur.

Chaque utilisateur bénéficie d'une expérience unique et personnalisée avec le Model Pro. Configurez les positions du fauteuil de votre unité dentaire, les paramètres des instruments, l'éclairage, l'hygiène, et bien plus encore. Vous pouvez créer un nombre illimité de profils et de comptes pour répondre aux besoins de toute votre équipe.

Toujours à l'heure.

L'application Diplomat Connect effectue automatiquement les diagnostics de base. Elle peut analyser les erreurs et transmettre les informations à nos techniciens, tout en maintenant le micrologiciel de votre unité dentaire à jour. Cela réduit considérablement les temps d'immobilisation de votre Model Pro.

Nous veillons sur vous.

Nous savons que des accidents peuvent survenir. Mais ne vous inquiétez pas: si votre tablette venait à se casser, tous vos réglages sont sauvegardés en ligne en toute sécurité. Vous n'avez besoin de les configurer qu'une seule fois.

Tablette ou écran tactile intégré.



Deux interfaces. Un seul niveau d'excellence.

Les deux options de pilotage — la tablette et l'écran tactile intégré — offrent les mêmes performances, la même qualité et la même fiabilité sans compromis.

Même ADN Diplomat. Une autre façon d'interagir.


Que vous choisissiez la tablette ou l'écran intégré, vous bénéficiez de la même technologie puissante, de la même précision et du même design.

	Tablette	Écran tactile
Simplicité d'utilisation	•	•
Création d'un nombre illimité d'utilisateurs	•	•
Enregistrement des réglages utilisateur (positions, protocoles)	•	•
Communication avec le patient (vidéos, images, actes)	•	
Service à distance (mise à jour firmware des cartes)	•	
Futures mises à jour de l'application Diplomat Connect	•	
Connexion aux dispositifs radiographiques	•	

Diplomat Pro. Conçu selon votre façon de travailler.


Tablette ou écran tactile intégré? Choisissez le style qui convient le mieux à votre cabinet. La performance reste identique.

Gagnez du temps.

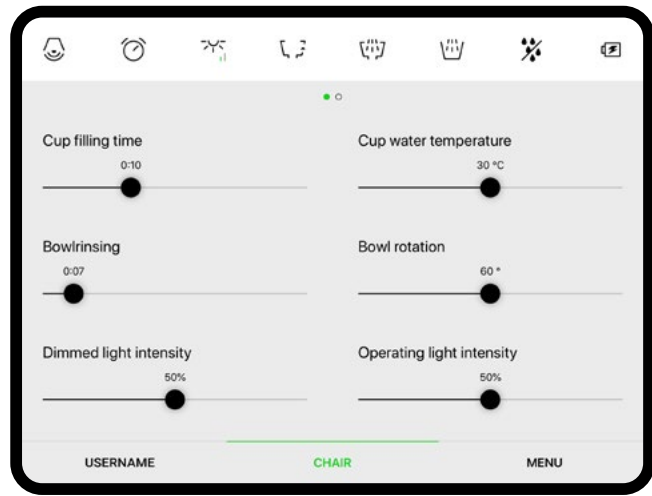

Réglages de traitement personnalisables.

Préprogrammez les positions du fauteuil, les réglages des instruments et les préférences d'éclairage pour les actes courants. Cette fonctionnalité réduit les temps de transition et garantit un flux de travail cohérent et optimisé pour chaque type de traitement.

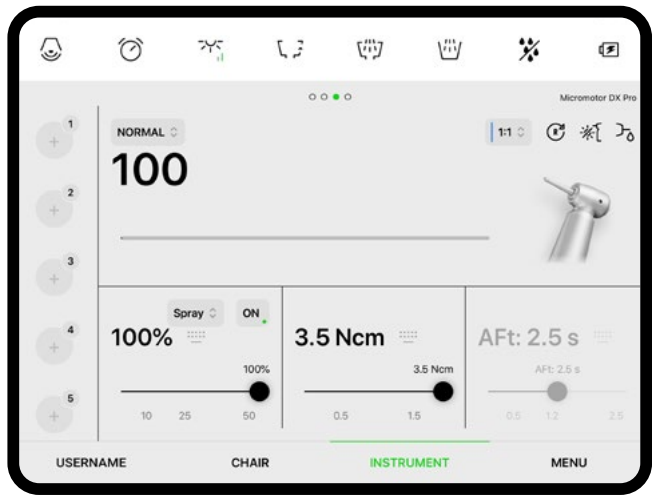

Changement d'instrument automatisé.

Passez d'un instrument à l'autre en toute fluidité et rappelez les réglages préprogrammés d'une simple commande, ce qui fluidifie le déroulement du traitement et fait gagner un temps précieux au fauteuil.



Imagerie numérique intégrée.

Vous pouvez désormais capturer efficacement des images intra-orales ou des radiographies sans quitter le côté du patient, éliminant le besoin de vous déplacer entre différents appareils ou pièces.

Facilité de conversion.

Convertissez votre unité dentaire de gauche à droite en seulement 30 secondes. Soulevez l'assise, relâchez le frein, faites pivoter l'unité, puis reverrouillez le frein. Voilà, plus rapide qu'une pause-café. Cette fonctionnalité s'applique au Model Pro 500 et au Model Pro 700.



Intelligent au quotidien en matière d'hygiène.

Nettoyage des tamis en toute simplicité.

Les tamis situés sous le capot arrière du bloc crachoir servent à capter les particules grossières aspirées. Leur nettoyage est aussi simple que de les retirer et de les rincer sous l'eau courante.

Un jeu d'enfant!



Support d'hygiène.



Flexibles d'instruments dans le support d'hygiène.



Hygiène automatique des gros et petits flexibles d'aspiration.

Désinfection intensive des circuits d'eau des instruments.

Les désinfectants recommandés sont l'Alpron, le Sanosil S003 ou le Dentosept P à 100% de concentration. Les circuits de refroidissement restent propres et ne nécessitent aucun autre moyen de désinfection*.

La désinfection des circuits de refroidissement des instruments peut être:

- 01) Manuelle
- 02) Semi-automatique
- 03) Automatique

L'hygiène automatique propose 4 réglages:


- 01) Hygiène de début de journée.
- 02) Hygiène après traitement.
- 03) Hygiène de fin de journée.
- 04) Hygiène intensive.



IRIS – la nouvelle génération de tabourets dentaires.

IRIS est une gamme moderne de tabourets dentaires conçue autour de l'essentiel: ergonomie, durabilité et design intemporel. Développée pour les dentistes et les assistant(e)s, IRIS permet un traitement assis confortable, sain et efficace.

Des matériaux soigneusement sélectionnés, une conception de précision et la conformité aux normes internationales (EN ISO 7493) font d'IRIS un choix fiable pour tout cabinet dentaire. Son design épuré et contemporain s'intègre parfaitement dans toute salle de soins, garantissant harmonie visuelle et aspect professionnel.

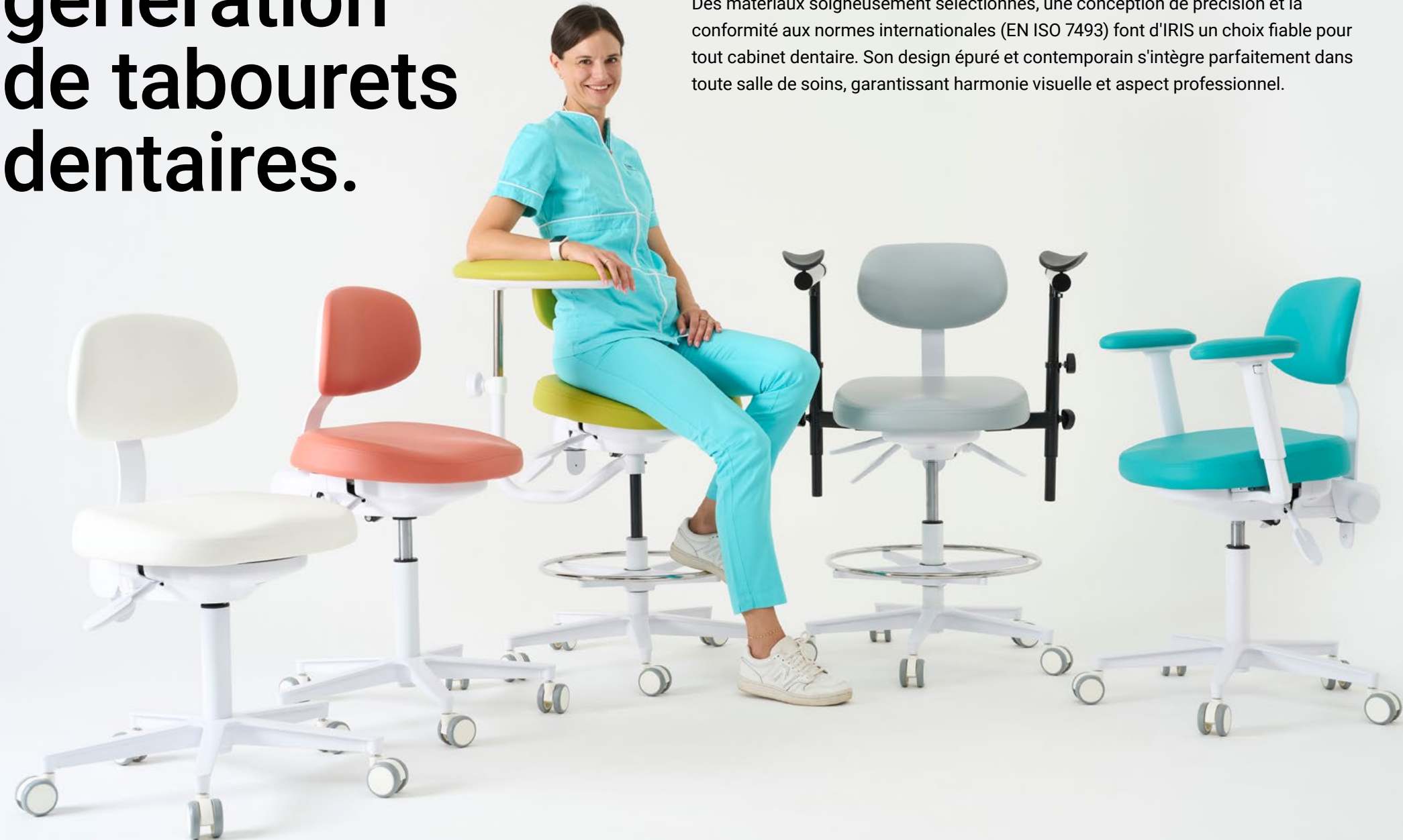

Bénéfices clés.

- Ergonomie.** Favorise une posture saine, réduit les tensions et soutient les dentistes lors de longues heures de travail.
- Durabilité.** Conçu pour durer, même en usage quotidien intensif.
- Design.** Intemporel, polyvalent et parfaitement intégré à tout espace de travail dentaire.

Versions.

- IRIS avec dossier classique.** Hauteur réglable par piston pneumatique:
Hauteur d'assise minimale: 490 mm.
Hauteur d'assise maximale: 650 mm.
- IRIS avec dossier classique + bras d'appui «banane».** Même plage de hauteur que ci-dessus, avec un soutien latéral supplémentaire pour les interventions les plus exigeantes.





Conçu pour
la posture,
pensé pour la
précision.

Asseyez-
vous plus
intelligemment.
Travaillez plus
longtemps.



Là où l'équilibre
rencontre la
performance.



Un confort
qui suit vos
mouvements.



Options de mécanisme.

Version de base. Réglage simple de la hauteur d'assise.

Mécanisme Ergo avancé. Inclinaison de l'assise, inclinaison du dossier et réglage de la hauteur pour un confort entièrement personnalisé.

Fixation d'assise silent block. Permet à l'assise de suivre le mouvement du praticien, améliorant le soutien ergonomique dynamique.

Confort & matériaux.

Assise en mousse PUR moulée à forme ergonomique. Confort maximal, durabilité et répartition uniforme du poids (une amélioration majeure par rapport à la mousse découpée traditionnelle).

Dossier galbé. Soutien stable pour un travail de précision.

Accessoires & options.

- Accoudoirs gauche et droit.
- Accoudoirs spéciaux pour utilisateurs de microscope.
- Anneau repose-pieds pour un soutien supplémentaire des jambes.
- Roulettes avec système de freinage pour un positionnement stable.




Découvrez Diplomat Dental.

Diplomat Dental est une entreprise familiale dont l'histoire remonte à 1945. Située dans la «vallée dentaire européenne», à Piešťany, à environ 100 kilomètres de Vienne, elle bénéficie d'une position idéale, tant sur le plan géographique que par l'expérience acquise au fil de 60 années de développement. Avec des milliers de dentistes satisfaits à travers le monde, l'entreprise opère aujourd'hui sa transition vers la dentisterie digitalisée, sous l'impulsion de la 3^e génération de la famille Nerád à sa direction.

Fabrication intelligente.

Tous nos produits sont conçus et développés avec soin pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients, tout en respectant nos normes de qualité élevées.

Après ce processus, nos dentistes bêta-testeurs travaillent avec les prototypes pendant une durée pouvant aller jusqu'à un an, et leurs retours nous permettent d'affiner le produit.

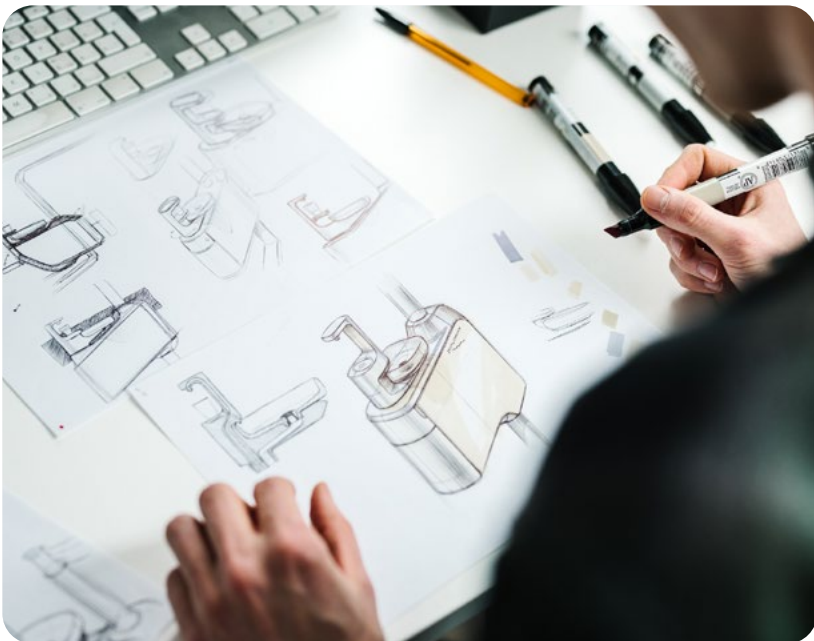

Direction intelligente.

Le PDG Tomáš Nerád investit massivement dans la recherche et le développement, l'innovation et de nouveaux produits haut de gamme. Sous sa direction, Diplomat Dental s'est transformée en une entreprise mondiale proposant des produits à la pointe de la technologie et des innovations intelligentes inédites sur le marché dentaire.


Ses efforts ont été récompensés par la plus prestigieuse distinction entrepreneuriale — EY Technological Entrepreneur of the Year 2023.




«Notre philosophie produit se concentre sur des plateformes ouvertes, des solutions modulaires et intelligentes qui améliorent le flux de travail de votre cabinet dentaire — rendant les technologies avancées et les outils intelligents faciles à utiliser et accessibles à chaque dentiste.»

Tomas Nerad,
PDG – Diplomat Dental


Unit porte-instruments

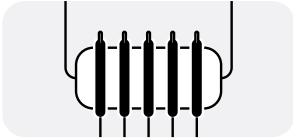


Style traditionnel
option 5 instruments

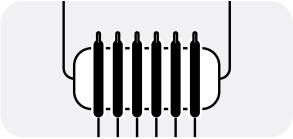

Style traditionnel
option 6 instruments

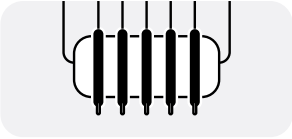

Style continental
option 5 instruments

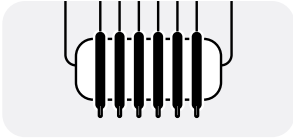

Style continental
option 6 instruments

Panneau de commande



Application Diplomat Connect
sous iOS



Application Diplomat Connect
sous Android

Plateau



Optionnel
Plateau supplémentaire
dimensions 370 x 290 mm,
sur la potence lumineuse



Optionnel
Plateau supplémentaire sous l'unit porte-instruments
uniquement pour style TS

voir plus d'options page 45

Élément assistant(e)



Standard
Basique



Optionnel
Avancé



Standard
Crachoir rotatif manuel



Optionnel
Crachoir rotatif automatique



Optionnel
Bras d'assistance pantographique


Têteière



Standard
Têteière mécanique 2D avant/arrière



Optionnel
Têteière mécanique 3D avant/arrière et latérale (gauche/droite)

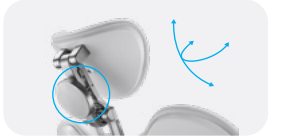

Optionnel
Têteière pneumatique 3D avant/arrière et latérale (gauche/droite), commandée d'une seule main par frein pneumatique

Lampe



Standard
XENOS



Optionnel
MAIA



Optionnel
SIRIUS

Pédale



Standard
Nok



Optionnel
Swing

Moniteur




Optionnel
Moniteur Neovo 22" DR22 blanc, écran large
Moniteur Neovo 22" RX22G noir, Full HD, écran large

Types de revêtement



Revêtement Standard
(sans couture)

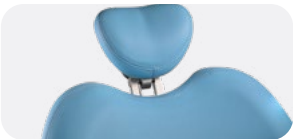


Revêtement Confort
(avec couture)



Revêtement Premium
(avec couture et mousse active)


Collections de couleurs de revêtement

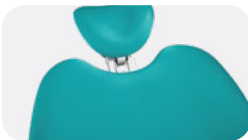


Collection
Standard



Collection
Spéciale

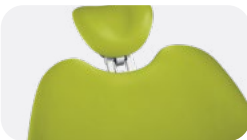

Collection
Antimicrobienne

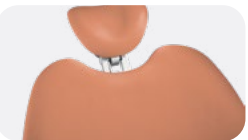

Collection Premium
(uniquement pour revêtement Premium)

Groupe hydrique



Standard
Gros et petits flexibles d'aspiration avec vanne de sélection (deux filtres)

Tabouret



Optionnel
D10L



Optionnel
Iris

Accessoires



Optionnel
Coussin pour enfant



Optionnel
Housses de protection

Peinture




Optionnel
Peinture intégrale blanc satiné mat

Découvrez le portefeuille Diplomat Dental.

Découvrez également notre gamme Model One pour en apprendre
davantage sur la nouvelle ère de la dentisterie digitalisée.

Découvrez le portefeuille Diplomat Dental.

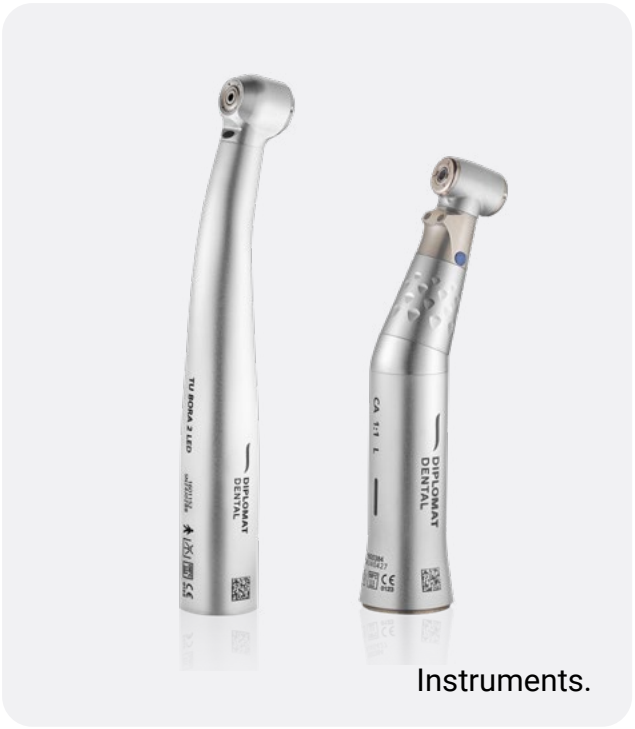

Model Pro 500.



Fouets supérieurs ou inférieurs en option

Convertible (pour droitiers et gauchers)

Version portée

5 instruments sur la table du dentiste

—

—

Commande au pied multifonction sans fil (option)

—

Coloris personnalisables du revêtement

Coloris personnalisables du bloc crachoir

—

Model Pro 600.



Fouets supérieurs ou inférieurs en option

—

Version élévatrice

5 instruments sur la table du dentiste

—

—

Commande au pied multifonction sans fil (option)

—

Coloris personnalisables du revêtement

Coloris personnalisables du bloc crachoir

Équipable en radiographie (bras supplémentaire)

Model Pro 700.



Fouets supérieurs ou inférieurs en option

Convertible (pour droitiers et gauchers)

Version portée

6 instruments sur la table du dentiste

Synchronisation assise & dossier*

Rotation électronique du bol*

Commande au pied multifonction sans fil (option)

Peinture intégrale blanc satiné mat*

Coloris personnalisables du revêtement

Coloris personnalisables du bloc crachoir

—

Model Pro 800.



Fouets supérieurs ou inférieurs en option

—

Version élévatrice

6 instruments sur la table du dentiste

Synchronisation assise & dossier*

Rotation électronique du bol*

Commande au pied multifonction sans fil (option)


Peinture intégrale blanc satiné mat*

Coloris personnalisables du revêtement

Coloris personnalisables du bloc crachoir

Équipable en radiographie (bras supplémentaire)

*Fonction standard avec avantage tarifaire sur Model Pro 700 et 800; en option sur Model Pro 500 et 600.

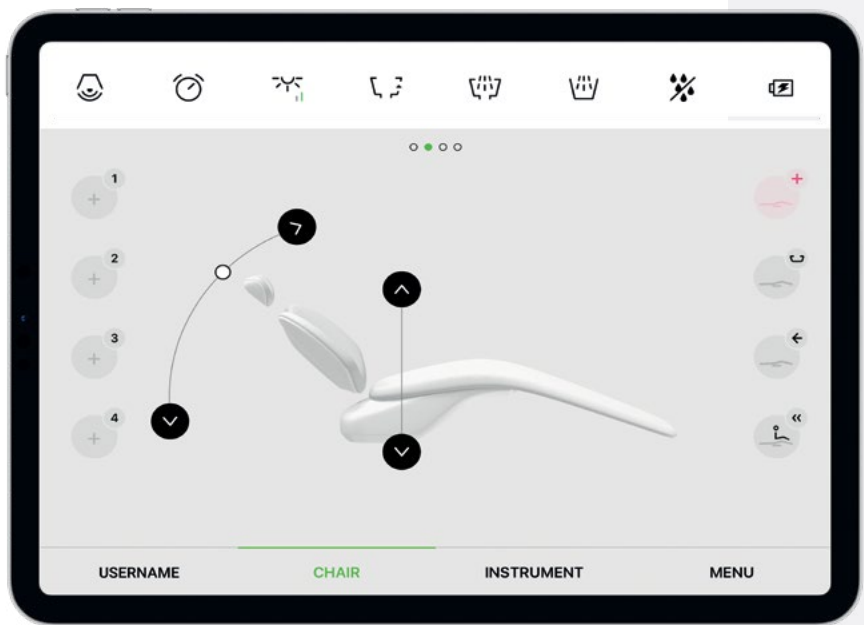

Contactez notre équipe commerciale:

+421 33 7954 111
info@diplomat-dental.com

Suivez-nous:

- @diplomat_dental
- Diplomat dental
- Diplomat Dental Solutions
- Diplomat Dental Solutions



www.diplomat-dental.com

Load & Play



Digitalisez votre cabinet grâce à une simple tablette et bénéficiez du système de pilotage pour unités dentaires le plus avancé et le plus convivial du marché.

Utilisez votre propre tablette pour piloter votre unité dentaire et vos instruments. Android et iOS sont tous deux entièrement pris en charge. Sauvegarde des données sur iCloud ou Android Drive. Accès rapide et sécurisé aux données patient, aux radiographies et aux photos. Mises à jour automatiques, nombre d'utilisateurs illimité et interface conviviale.

- Téléchargez l'application Diplomat Connect.
- Activez le Bluetooth.
- Prêt! Votre unité dentaire est prête à décoller.



«Diplomat Connect» est disponible pour iPad sur l'App Store et pour Android sur Google Play.

